




HeartSine samaritan® PAD  
350P-Trainer  
Modell TRN-350-1  
Bedienungsanleitung

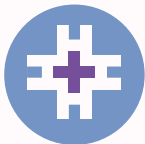

HeartSine®

Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen zur Bedienung des HeartSine PAD 350P-Trainers.

Der HeartSine PAD 350P-Trainer (Trainingsgerät für den HeartSine PAD 350P) ist ein nicht-medizinisches Gerät, das für die Schulung von Ersthelfern zur korrekten Verwendung des automatisierten externen Defibrillators HeartSine PAD 350P vorgesehen ist. Das Trainingsgerät ist nicht für medizinische Zwecke einsetzbar und darf nicht in realen Rettungssituationen eingesetzt werden.



**WICHTIG:** *Um Verwechslungen bei realen Rettungsmaßnahmen zu vermeiden, bewahren Sie den Trainer nicht in der Nähe des automatisierten externen Defibrillators HeartSine PAD auf.*

Um eine schnelle und einfache Identifikation zu ermöglichen, verfügt der HeartSine PAD 350P-Trainer auf der Vorderseite über eine gelbe Benutzeroberfläche. Der automatisierte externe Defibrillator HeartSine PAD 350P hingegen ist auf der Vorderseite mit einer marineblauen/schwarzen Benutzeroberfläche ausgestattet.

HeartSine empfiehlt, dass potentielle Nutzer eines seiner Defibrillatoren in Herz-Lungen-Wiederbelebnungsmaßnahmen unter Einsatz eines Defibrillators (HLW-D) geschult werden. Der HeartSine PAD 350P-Trainer ist für die Verwendung durch anerkannte HLW-D-Ausbilder für diesen Zweck bestimmt.

Der HeartSine PAD 350P-Trainer ist werkseitig so eingestellt, dass er in Übereinstimmung mit den gemeinsamen Reanimationsleitlinien der American Heart Association und des European Resuscitation Council von 2010 funktioniert. Das Gerät verfügt über sechs vorprogrammierte Szenarien, die auf diesen Leitlinien basieren.

Sollten sich die HLW-Leitlinien ändern, wird eine Software zur Verfügung gestellt werden, um den HeartSine PAD 350P-Trainer entsprechend den neuen Leitlinien umzuprogrammieren. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihren autorisierten HeartSine-Händler oder direkt an HeartSine Technologies.

Nach dem Einschalten gibt der HeartSine PAD 350P-Trainer Sprachanweisungen und begleitende visuelle Anzeigen aus. Das Trainingsgerät kann auch mit der beigefügten Fernbedienung gesteuert werden.

Für eine Liste der vorhandenen Ersatz- und Zubehörteile wenden Sie sich bitte an ihren autorisierten HeartSine-Händler.

1) Vergewissern Sie sich, dass der HeartSine PAD 350P-Trainer vollständig geladen ist (siehe Abschnitt „Aufladen des Geräts“ in dieser Bedienungsanleitung).

2) Platzieren Sie den HeartSine PAD 350P-Trainer und die Pad-Pak-Elektrodenkassette des Trainers auf einer ebenen Oberfläche. Drücken Sie die Pad-Pak-Elektrodenkassette in die Öffnung des HeartSine PAD 350P-Trainers, bis Sie ein Klick-Geräusch hören, um sicherzugehen, dass es richtig eingesetzt ist.

3) Legen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Batterien in die Fernbedienung des Trainingsgeräts HeartSine PAD ein.



*Drücken Sie keine Tasten, während Sie die Batterien in die Fernbedienung einlegen, da ansonsten die ID der Fernbedienung zurückgesetzt wird.*

4) Drücken Sie die EIN/AUS-Taste am HeartSine PAD 350P-Trainer und beachten Sie die Sprach-anweisungen, um sicherzustellen, dass das Gerät funktioniert.

5) Ist der HeartSine PAD 350P-Trainer nicht ausreichend geladen, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Beim Einschalten blinkt die Statusanzeige rot, um anzuzeigen, dass das Gerät geladen werden muss. Wenn die Batterie des Trainers vollständig entladen ist, schaltet sich das Gerät überhaupt nicht ein. Eine vollständige Anleitung finden Sie im Abschnitt „Aufladen des Geräts“ in dieser Bedienungsanleitung.

## Ein- und Ausschalten des HeartSine PAD 350P-Trainers

Zum Einschalten des HeartSine PAD 350P-Trainers drücken Sie die grüne EIN/AUS-Taste.



*Standardmäßig arbeitet der Trainer in der zuletzt verwendeten Einstellung.*

Um den HeartSine PAD 350P-Trainer auszuschalten, drücken Sie erneut die EIN/AUS-Taste.

Nachdem der HeartSine PAD 350P-Trainer eingeschaltet wurde, kann er auch mit der beigegeführten Fernbedienung ausgeschaltet werden. Um den Trainer auszuschalten, drücken Sie die AUS-Taste (rote Taste) auf der Fernbedienung.



*Wenn der HeartSine PAD 350P-Trainer eingeschaltet ist, schaltet er sich nach fünfzehn Minuten automatisch aus, wenn das Gerät nicht verwendet wird.*

## HeartSine PAD 350P-Trainer



- A** Datenschnittstelle
- B** Batteriestatusanzeige
- C** Statusanzeige
- D** Schock-Taste
- E** Anzeige „Patient kann berührt werden“
- F** Lautsprecher
- G** Pad-Pak-Elektrodenkassette
- H** EIN/AUS-Taste
- I** Anzeige „Patienten nicht berühren“
- J** Anzeige „Anbringen der Elektroden“
- K** Aktionspfeile



### EIN/AUS-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. (Wenn sie gedrückt wird, wenn ein Schock notwendig ist, wird die Warnmeldung „Warnung, AUS-Taste wurde gedrückt“ ausgegeben; das Gerät schaltet sich erst AUS, wenn Sie die Taste erneut drei Sekunden lang gedrückt halten.)



### Anzeige „Anbringen der Elektroden“

Die Aktionspfeile rund um dieses Symbol blinken, um den Benutzer anzuweisen, dass die Elektroden des PAD 350P wie angezeigt am Patienten befestigt werden sollen.



### Anzeige „Patient kann berührt werden“

Der Patient kann sicher berührt werden, wenn die Aktionspfeile rund um dieses Symbol aufblinken. Sie können HLW durchführen oder den Patienten untersuchen.



### Aktionspfeile

Die Aktionspfeile um ein Symbol blinken, um anzuzeigen, was der Benutzer tun soll.



### Anzeige „Patienten nicht berühren“

Berühren Sie den Patienten nicht, wenn die Aktionspfeile um dieses Symbol blinken. Der PAD 350P analysiert möglicherweise gerade den Herzrhythmus des Patienten oder bereitet sich auf die Abgabe eines Elektroschocks vor.



### Statusanzeige

Blinkt grün – der Trainer ist einsatzbereit  
Blinkt rot - der Trainer muss aufgeladen werden



### Schock-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Abgabe eines therapeutischen Schocks zu simulieren.

## Verwendung der Elektroden

Die Trainingsszenarien umfassen Sprachanweisungen, die den Benutzer auffordern, die Elektroden aus der Pad-Pak-Elektrodenkassette zu entnehmen und sie wie angegeben anzubringen. Führen Sie folgenden Schritte aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

- 1) Ziehen Sie an der grünen Lasche, um die Pad-Pak-Elektrodenkassette des Trainers zu öffnen und die Elektrodenkabel vollständig zu entnehmen.
- 2) Lösen Sie die Schutzfolie von den Elektroden.
- 3) Befestigen Sie die Elektroden, wie auf der Anzeige „Anbringen der Elektroden“ dargestellt; die am Brustbein und über der Herzspitze anzubringenden Elektroden sind jeweils eindeutig als solche gekennzeichnet.
- 4) Drücken Sie die Elektroden fest an, und achten Sie auf einen guten Kontakt.

## Aufwickeln der Elektroden nach der Verwendung


- 1) Bringen Sie die Schutzfolie wieder an den Elektroden an oder tauschen Sie die Elektroden gegen neue aus.
- 2) Falten Sie die Elektroden zusammen, so dass sich die Schutzfolie außen befindet.
- 3) Lassen Sie die Elektroden von der Vorrichtung hängen und wickeln Sie sie mithilfe der Kurbel der blauen Aufrollvorrichtung wieder vollständig auf:



**A** Aufrollvorrichtung  
**B** Kurbel

- 4) Legen Sie die Elektroden auf die Pad-Pak-Kassette und achten Sie darauf, dass sich die Kabel unter den Elektroden befinden.
- 5) Schließen Sie die Pad-Pak-Elektrodenkassette, indem Sie das gelbe Schubfach einschieben.

## Fernbedienung des PAD 350P-Trainers

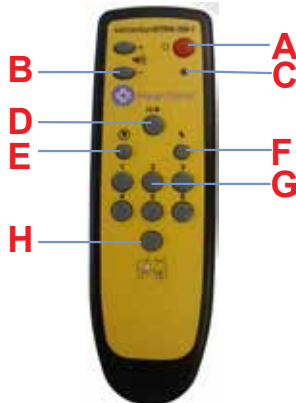

- A AUS-Taste
- B Lautstärkeregelung
- C Anzeige für schwache Batterie
- D Pause-Taste
- E Szenario „Kein Schock empfohlen“
- F Szenario „Schock empfohlen“
- G Szenario wählen
- H Elektroden anbringen



### Abschalten des Trainers

Der HeartSine PAD 350P-Trainer kann mit der Fernbedienung ausgeschaltet werden. Hierzu drücken Sie die rote Taste auf der Fernbedienung.



### Lautstärkeregelung

Am HeartSine PAD 350P-Trainer sind vier Lautstärke-Einstellungen verfügbar. Die Steuerungstasten für die Lautstärke befinden sich links von der AUS-Taste auf der Fernbedienung. Mit der „+“-Taste erhöhen Sie die Lautstärke, mit der „-“-Taste senken Sie die Lautstärke.



### Pause-Funktion des Trainers

Während des Trainings kann der HeartSine PAD 350P-Trainer angehalten werden. Um die Pausenfunktion des Trainers zu aktivieren, drücken Sie die Pause-Taste (||▶). Der Trainer bleibt in diesem Modus, bis die Pause-Taste erneut gedrückt wird; dann fährt er im gewählten Szenario fort.



### Änderung des Übungsszenarios

Der HeartSine PAD 350P-Trainer verfügt über sechs vorprogrammierte Trainingsszenarien (Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Trainingsszenarien“ in dieser Bedienungsanleitung). Das Szenario kann geändert werden, indem die entsprechende Nummerntaste auf der Fernbedienung gedrückt wird; durch Drücken der Taste „3“ beispielsweise wird das Trainingsszenario drei ausgewählt.

Nach der Änderung des Szenarios arbeitet das Gerät, wie im Abschnitt „Trainingsszenarien“ beschrieben. Das Gerät bleibt in diesem Szenario, bis ein anderes Szenario ausgewählt wird.

Der HeartSine PAD 350P-Trainer verfügt über sechs vorprogrammierte Trainingsszenarien, aus denen Sie wählen können. Alle Szenarien basieren auf den Leitlinien des Europäischen Reanimationsrates ERC und der amerikanischen Herzgesellschaft AHA von 2010. Die Einzelheiten der Szenarien sind nachfolgend beschrieben.

## Szenario 1

1. Einrichtbetrieb - „Alarmieren Sie den Rettungsdienst“, „Ziehen Sie die grüne Lasche“ usw.
2. Eingreifen des Benutzers - Nach Anbringen der Elektroden muss der Benutzer die „Elektroden“-Taste zur Bestätigung drücken.
3. Überwachungsmodus - „Herzrhythmus wird analysiert“, „Patienten nicht berühren“ usw.
4. Schock empfohlen - Benutzer muss Schock-Taste drücken
5. HLW-Modus - Benutzer muss HLW nach Anweisungen des Geräts je nach Bedarf durchführen
6. Überwachungsmodus - „Herzrhythmus wird analysiert“, „Patienten nicht berühren“ usw.
7. Kein Schock empfohlen
8. HLW-Modus - Benutzer muss HLW nach Anweisungen des Geräts je nach Bedarf durchführen
9. Wiederholen - Schritte 6 bis 8 werden wiederholt, bis die EIN/AUS-Taste gedrückt wird

## Szenario 2

1. Einrichtbetrieb - „Alarmieren Sie den Rettungsdienst“, „Ziehen Sie die grüne Lasche“ usw.
2. Eingreifen des Benutzers - Nach Anbringen der Elektroden muss der Benutzer die „Elektroden“-Taste zur Bestätigung drücken.
3. Überwachungsmodus - „Herzrhythmus wird analysiert“, „Patienten nicht berühren“ usw.
4. Kein Schock empfohlen
5. HLW-Modus - Benutzer muss HLW nach Anweisungen des Geräts je nach Bedarf durchführen
6. Überwachungsmodus - „Herzrhythmus wird analysiert“, „Patienten nicht berühren“ usw.
7. Schock empfohlen - Benutzer muss Schock-Taste drücken
8. HLW-Modus - Benutzer muss HLW nach Anweisungen des Geräts je nach Bedarf durchführen
9. Wiederholen - Schritte 6 bis 8 werden wiederholt, bis die EIN/AUS-Taste gedrückt wird

## Szenario 3

1. Elektroden - Das Gerät geht davon aus, dass die Elektroden bereits angebracht wurden
2. Überwachungsmodus - „Herzrhythmus wird analysiert“, „Patienten nicht berühren“ usw.
3. Elektroden überprüfen - „Elektroden überprüfen“
4. Eingreifen des Benutzers - Nach Anbringen der Elektroden muss der Benutzer die „Elektroden“-Taste zur Bestätigung drücken.
5. Überwachungsmodus - „Herzrhythmus wird analysiert“, „Patienten nicht berühren“ usw.
6. Schock empfohlen - Benutzer muss Schock-Taste drücken
7. HLW-Modus - Benutzer muss HLW nach Anweisungen des Geräts je nach Bedarf durchführen
8. Überwachungsmodus - „Herzrhythmus wird analysiert“, „Patienten nicht berühren“ usw.
9. Kein Schock empfohlen
10. HLW-Modus - Benutzer muss HLW nach Anweisungen des Geräts je nach Bedarf durchführen
11. Wiederholen - Schritte 3 bis 10 werden wiederholt, bis die EIN/AUS-Taste gedrückt wird

## Szenario 4

1. Elektroden - Das Gerät geht davon aus, dass die Elektroden bereits angebracht wurden
2. Überwachungsmodus - „Herzrhythmus wird analysiert“, „Patienten nicht berühren“ usw.
3. Schock empfohlen - Benutzer muss Schock-Taste drücken
4. HLW-Modus - Benutzer muss HLW nach Anweisungen des Geräts je nach Bedarf durchführen
5. Überwachungsmodus - „Herzrhythmus wird analysiert“, „Patienten nicht berühren“ usw.
6. Schock empfohlen - Benutzer muss Schock-Taste drücken
7. HLW-Modus - Benutzer muss HLW nach Anweisungen des Geräts je nach Bedarf durchführen
8. Überwachungsmodus - „Herzrhythmus wird analysiert“, „Patienten nicht berühren“ usw.
9. Kein Schock empfohlen
10. HLW-Modus - Benutzer muss HLW nach Anweisungen des Geräts je nach Bedarf durchführen
11. Wiederholen - Schritte 5 bis 10 werden wiederholt, bis die EIN/AUS-Taste gedrückt wird



## Szenario 5

Szenario 5 entspricht Szenario 1, nur dass im HLW-Modus zusätzlich Sprachanweisungen ausgegeben werden, wann Beatmungen durchzuführen sind.

1. Einrichtbetrieb - „Alarmieren Sie den Rettungsdienst“, „Ziehen Sie die grüne Lasche“ usw.
2. Eingreifen des Benutzers - Nach Anbringen der Elektroden muss der Benutzer die „Elektroden“-Taste zur Bestätigung drücken.
3. Überwachungsmodus - „Herzrhythmus wird analysiert“, „Patienten nicht berühren“ usw.
4. Schock empfohlen - Benutzer muss Schock-Taste drücken
5. HLW-Modus - Benutzer muss HLW nach Anweisungen des Geräts je nach Bedarf durchführen; umfasst auch Sprachanweisungen, zu welchem Zeitpunkt Beatmungen durchzuführen sind; für die Dauer von zehn Kompressionen spielt das Metronom ein Ticken anstelle der Pieptöne ab.
6. Überwachungsmodus - „Herzrhythmus wird analysiert“, „Patienten nicht berühren“ usw.
7. Kein Schock empfohlen
8. HLW-Modus - Benutzer muss HLW nach Anweisungen des Geräts je nach Bedarf durchführen; umfasst auch Sprachanweisungen, zu welchem Zeitpunkt Beatmungen durchzuführen sind; für die Dauer von zehn Kompressionen spielt das Metronom ein Ticken anstelle der Pieptöne ab.
9. Wiederholen - Schritte 6 bis 8 werden wiederholt, bis die EIN/AUS-Taste gedrückt wird

## Szenario 6

Szenario 6 entspricht Szenario 2, nur dass im HLW-Modus zusätzlich Sprachanweisungen ausgegeben werden, wann Beatmungen durchzuführen sind.

1. Einrichtbetrieb - „Alarmieren Sie den Rettungsdienst“, „Ziehen Sie die grüne Lasche“ usw.
2. Eingreifen des Benutzers - Nach Anbringen der Elektroden muss der Benutzer die „Elektroden“-Taste zur Bestätigung drücken.
3. Überwachungsmodus - „Herzrhythmus wird analysiert“, „Patienten nicht berühren“ usw.
4. Kein Schock empfohlen
5. HLW-Modus - Benutzer muss HLW nach Anweisungen des Geräts je nach Bedarf durchführen; umfasst auch Sprachanweisungen, zu welchem Zeitpunkt Beatmungen durchzuführen sind; für die Dauer von zehn Kompressionen spielt das Metronom ein Ticken anstelle der Pieptöne ab.
6. Überwachungsmodus - „Herzrhythmus wird analysiert“, „Patienten nicht berühren“ usw.
7. Schock empfohlen - Benutzer muss Schock-Taste drücken
8. HLW-Modus - Benutzer muss HLW nach Anweisungen des Geräts je nach Bedarf durchführen; umfasst auch Sprachanweisungen, zu welchem Zeitpunkt Beatmungen durchzuführen sind; für die Dauer von zehn Kompressionen spielt das Metronom ein Ticken anstelle der Pieptöne ab.
9. Wiederholen - Schritte 6 bis 8 werden wiederholt, bis die EIN/AUS-Taste gedrückt wird

Die Fernbedienung ermöglicht es dem Ausbilder eine manuelle Steuerung der Trainingsszenarien. Nach Einschalten des HeartSine PAD 350P-Trainers arbeitet das Gerät wie in den aufgeführten Trainingsszenarien beschrieben. Der Ausbilder kann diese automatische Einstellung jedoch umgehen, indem er die Tasten „Schock empfohlen“, „Kein Schock empfohlen“ oder „Elektroden anbringen“ drückt.



### **Schock empfohlen**

Nach Drücken der Taste „Schock empfohlen“ setzt der HeartSine PAD 350P-Trainer das ausgewählte Trainingsszenario außer Kraft und simuliert einen per Schock behandelbaren Herzrhythmus. Bei allen nachfolgenden Analysen wird dann eine Schockabgabe empfohlen, bis Sie den Trainer ausschalten oder die Taste „Kein Schock empfohlen“ auf der Fernbedienung drücken.



### **Kein Schock empfohlen**

Nach Drücken der Taste „Kein Schock empfohlen“ setzt der HeartSine PAD 350P-Trainer das ausgewählte Trainingsszenario außer Kraft und simuliert einen nicht per Schock zu behandelnden Rhythmus. Bei allen nachfolgenden Analysen wird dann keine Schockabgabe empfohlen, bis Sie den Trainer ausschalten oder die Taste „Schock empfohlen“ auf der Fernbedienung drücken.



### **Elektroden anbringen**

Nach Drücken der Taste „Elektroden anbringen“ gibt der Trainer während des Analysebetriebs Sprachanweisungen zum Anbringen der Elektroden aus. Diese Sprachanweisungen werden so lange ausgegeben, bis die Taste „Elektroden anbringen“ erneut gedrückt wird.

## HeartSine PAD 350P-Trainer – Handhabung der Batterien

Der HeartSine PAD 350P-Trainer ist mit einem Akku ausgestattet. Es wird empfohlen, vor allen Schulungsmaßnahmen sicherzustellen, dass der HeartSine PAD 350P-Trainer vollständig aufgeladen ist.

Bei voller Aufladung können Sie den HeartSine PAD 350P-Trainer etwa sieben Stunden benutzen, bevor er wieder aufgeladen werden muss.

Der HeartSine PAD 350P-Trainer überwacht den Batteriestatus. Mindestens eine Stunde, bevor die Batterie vollständig entladen ist, ertönt die Meldung:



„Warnung: Niedriger Batteriestand“

Wenn Sie diese Warnmeldung hören, können Sie den HeartSine PAD 350P-Trainer nur noch für eine begrenzte Zeit nutzen. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, schaltet sich das Gerät von selbst aus. Der Akku des Trainingsgerät sollte also möglichst vorher aufgeladen werden.

## Aufladen und Wiederaufladen des HeartSine PAD 350P-Trainers

Um den HeartSine PAD 350P-Trainer sicher aufzuladen, folgen Sie bitte den unten stehenden Anweisungen.

- 1) Stecken Sie den Ladeadapter in die dafür vorgesehene Buchse des HeartSine PAD 350P-Trainers. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter vollständig eingesteckt ist.
- 2) Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose.
- 3) Lassen Sie den Trainer aufladen. Die LED-Batteriestatusanzeige (neben dem Anschluss) leuchtet während der Schnellaufladung rot und blinkt, wenn der Ladevorgang nahezu abgeschlossen ist. Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt das LED-Lämpchen. Um einen völlig entladenen HeartSine PAD 350P-Trainer wieder aufzuladen, bedarf es bis zu sechs Stunden.
- 4) Ziehen Sie den Ladeadapter vom HeartSine PAD 350P-Trainer wieder ab. Schalten Sie den Trainer ein, um sicherzustellen, dass das Gerät funktioniert.

Wenn der HeartSine PAD 350P-Trainer während des Ladevorgangs eingeschaltet wird, sollte das Ladegerät aus- und wieder eingesteckt werden, um den Schnellladevorgang erneut zu starten.

Der HeartSine PAD 350P-Trainer darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät aufgeladen werden. Das Aufladen mit einem anderen Ladegerät führt zum Erlöschen der Garantie und kann den HeartSine PAD 350P-Trainer beschädigen.

Der HeartSine PAD 350P-Trainer und das Ladegerät sind nur für den Innengebrauch bestimmt. Bitte nicht in nasser oder feuchter Umgebung verwenden.

Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren des HeartSine PAD 350P-Trainers, der Pad-Pak-Elektrodenkassette des Trainers oder des Ladegeräts. Diese Teile sollten nicht geöffnet werden. Im unwahrscheinlichen Fall einer Fehlfunktion verständigen Sie bitte unverzüglich Ihren Händler.

## **Batterien der Fernbedienung**

Die Fernbedienung des HeartSine PAD 350P-Trainers ist mit einer Warnleuchte für niedrigen Batterie-status ausgestattet. Wenn diese Anzeige zweimal rot aufleuchtet, nachdem eine Taste auf der Fernbedienung gedrückt wurde, ist dies ein Hinweis darauf, dass die Batterien in der Fernbedienung ausgetauscht werden müssen.

Die Fernbedienung wird mit zwei handelsüblichen AAA-Batterien betrieben.

Um die Batterien auszutauschen, entfernen Sie bitte die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung.



Wenn Sie die Batterien in die Fernbedienung einlegen und dabei die AUS-Taste drücken, schaltet die Fernbedienung in den Verbindungsmodus und erhält eine neue Übertragungs-ID. Diese unterscheidet sich von der zuvor im Trainingsgerät gespeicherten Nummer. Sollte dies unabsichtlich geschehen, muss das Kopplungsverfahren vollständig durchgeführt werden, um die Fernbedienung wieder mit dem HeartSine PAD 350P-Trainer abzustimmen.

Ein normaler Batteriewechsel verursacht keine Probleme, da das Kopplungsverfahren nur ausgelöst wird, wenn gleichzeitig die AUS-Taste gedrückt wird.

## **Software zur Konfiguration des HeartSine PAD 350P-Trainers**

Für Einstellungen des HeartSine PAD 350P-Trainers können Sie von der HeartSine-Homepage ([www.heartSine.com](http://www.heartSine.com)) kostenlos Software herunterladen. Diese Software ermöglicht es Ihnen, ein Upgrade des Trainers durchzuführen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

### **Sprache**

Der HeartSine PAD 350P-Trainer kann so umprogrammiert werden, dass er mit Sprachanweisungen in einer der zur Verfügung stehenden Sprachen arbeitet. Für Einzelheiten zur Durchführung laden Sie die aktuelle Bedienungsanleitung für die Software zur Konfiguration des HeartSine PAD 350P-Trainers von der HeartSine-Homepage herunter.

### **Abstimmung der Fernbedienung auf den HeartSine PAD 350P-Trainer**

Jeder HeartSine PAD 350P-Trainer hat eine eigene Fernbedienung. Dadurch können mehrere Geräte auf engem Raum benutzt werden, ohne dass es zu Interferenzen kommt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Ihre Fernbedienung nicht mehr mit Ihrem Trainer funktioniert, muss sie möglicherweise erneut mit Ihrem Trainer gekoppelt werden.

Die Software zur Konfiguration des HeartSine PAD 350P-Trainers kann verwendet werden, um eine Fernbedienung mit Ihrem Trainer zu koppeln. Umfassende Anweisungen dazu finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

### **Identifikation des Geräts**

Jedem HeartSine PAD 350P-Trainer wird bei der Herstellung eine Identifikationsnummer zwischen 001 und 255 zugewiesen. Die Fernbedienung für den Trainer erhält dann dieselbe Identifikationsnummer. Im unwahrscheinlichen Fall, dass zwei Geräte mit derselben Identifikationsnummer zur gleichen Zeit verwendet werden, verwenden Sie bitte die Trainer-Einstellungs-Software für den HeartSine PAD 350P-Trainer, um den beiden Geräten neue Nummern zuzuweisen. Nach der Zuweisung einer neuen Identifikationsnummer muss die Fernbedienung mit dem Gerät gekoppelt werden.

Es folgt ein kurzer Überblick über die Grundlagen der Herz-Lungen-Wiederbelebung für Ersthelfer gemäß den Empfehlungen der American Heart Association (AHA) und des European Resuscitation Council (ERC) in ihren 2010 veröffentlichten Leitlinien für die HLW und Notfall-Herz-Kreislauf-Behandlung. Der Überblick ist nur zum schnellen Nachschlagen für ausgebildete HLW-Ersthelfer gedacht. HeartSine empfiehlt, dass alle potenziellen Nutzer des PAD 350P vor der Inbetriebnahme des Geräts durch eine qualifizierte Ausbildungseinrichtung sowohl in der Herz-Lungen-Wiederbelebung als auch in der Anwendung des PAD 350P geschult sind. Bei etwaigen Änderungen der Leitlinien wird Ihnen zum Upgrade des PAD 350P Software zur Verfügung gestellt, damit die neuen Vorschriften eingehalten werden können. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihren autorisierten HeartSine-Händler oder direkt an HeartSine Technologies.

NOTRUF (112) absetzen. Ein AED-Gerät holen lassen



Beobachten, hören, fühlen



HLW durchführen. Neueste AHA- oder ERC-Leitlinien befolgen



Verwenden Sie ein AED-Gerät, falls verfügbar



Setzen Sie die HLW fort, bis der Rettungsdienst eintrifft. Wechseln Sie sich mit einer zweiten Person nach einem Zyklus oder alle 2 Minuten ab

**Person nicht ansprechbar?  
Person ansprechen und an der Schulter rütteln  
Rettungsdienst alarmieren**

**Atemwege freimachen, Atmung überprüfen**

**HLW durchführen, bis AED verfügbar ist  
ODER bis der Rettungsdienst eingetroffen ist  
Bitte Sie umstehende Personen um Mithilfe und  
wechseln Sie sich bei der HLW ab**

**Falls vorhanden, AED-Gerät einschalten und  
Anweisungen beachten - AED analysiert  
Rhythmus**

**SCHOCK  
EMPFOHLEN**

**KEIN SCHOCK  
EMPFOHLEN**

**SCHOCK  
ABGEBEN**

**HLW 2 Minuten  
lang fortsetzen**

**HLW 2 Minuten  
lang fortsetzen**

**Fortsetzen, bis der Patient wieder erwacht,  
d. h. sich bewegt, die Augen öffnet und  
normal atmet**

## Hinweise zur Entsorgung

Der HeartSine PAD 350P-Trainer ist ein wiederverwendbares Gerät. Erfolgt die Wartung nach den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, beträgt die Dauer der Gewährleistung zwei Jahre ab Herstellungsdatum. Das Jahr der Herstellung des Geräts wird durch die ersten beiden Stellen der Seriennummer angezeigt.

Wenn Sie den HeartSine PAD 350P-Trainer entsorgen möchten, bringen Sie das Gerät zu einem Wertstoffhof, damit es gemäß den nationalen, regionalen und örtlichen Vorschriften entsorgt wird. Oder senden Sie es zur Entsorgung zurück zu Ihrem Fachhändler oder HeartSine Technologies.

Entsorgung innerhalb der Europäischen Union:

Entsorgen Sie den HeartSine PAD 350P-Trainer nicht im Hausmüll. Sammeln Sie den PAD 350P-Trainer getrennt, damit er gemäß der Richtlinie 2002/96/EWG des Europäischen Parlaments und Rates der Europäischen Union über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EAR) wieder verwendet oder recycelt wird, oder geben Sie das Gerät Ihrem Händler vor Ort oder HeartSine Technologies zur Entsorgung zurück.

## Gewährleistungsausschluss

HeartSine Technologies oder die autorisierten Vertriebspartner sind zu keinen Service-/Reparaturleistungen unter dieser Gewährleistung verpflichtet, wenn:

- a. an dem Gerät unerlaubte Änderungen vorgenommen wurden
- b. kein Standardzubehör eingesetzt wurde
- c. das Gerät nicht gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung eingesetzt wurde
- d. die Seriennummer entfernt, unkenntlich oder auf andere Weise verändert wurde
- e. das Gerät, Elektroden oder Batterien nicht gemäß den Umweltspezifikationen gelagert oder verwendet werden
- f. das Gerät mit Hilfe nicht genehmigter Methoden oder ungeeigneter Ausrüstung getestet wurde (siehe Abschnitt „Wartung“ dieser Bedienungsanleitung).

Alle unter diese Gewährleistung fallenden Reklamationen und Ansprüche sind an den autorisierten Händler zu stellen, bei dem das Gerät erworben wurde. Vor der Durchführung von Reparaturen unter dieser Gewährleistung benötigt HeartSine Technologies einen Kaufbeleg. Das Gerät muss gemäß der Bedienungsanleitung und dem Verwendungszweck benutzt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an [support@heartsine.com](mailto:support@heartsine.com).









HeartSine®

**Weltweiter Hauptsitz:**

HeartSine Technologies Inc  
121 Friends Lane  
Suite 400  
Newtown, PA 18940  
Tel: +1 215 860 8100  
Fax: +1 215 860 8192

**Hergestellt von:**

HeartSine Technologies Ltd  
Canberra House  
203 Airport Road West  
Belfast BT3 9ED  
Nordirland  
Tel: +44 28 9093 9400



[www.heartsine.com](http://www.heartsine.com)

[www.heartsine.eu](http://www.heartsine.eu)

[support@heartsine.com](mailto:support@heartsine.com)

**Autorisierter Händler**



Andreas Leithner  
Sommerschuhgasse 7  
1230 Wien  
Tel.: 01/887 39 90  
[www.MTL-Medical.com](http://www.MTL-Medical.com)  
[www.AED-Austria.com](http://www.AED-Austria.com)